

RIGEL LIFE SCIENCES


Contamination control specialists

PIASTRE PRONTE PER CAMPIONAMENTO AMBIENTALE

**TERRENI PRONTI IN PIASTRE
PETRI DA 90 MM E CONTACT DA 55**

MM

RIGEL – PMM Dr. Mueller

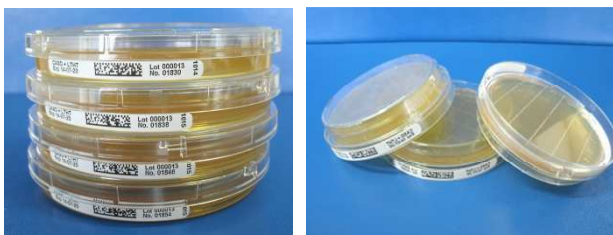

TSA

TSA+
LTHT

TSA+ β L

SDA+
LTHT

La tecnologia RIGEL unita all'eccellenza del campionatore biologico HEBAS e all'esperienza di PMM-Dr. Mueller.

- Terreni irradiati per la determinazione della carica batterica totale dell'aria o delle superfici
- Formulazioni USP/EP armonizzate
- Shelf life elevata
- Conservazione a temperatura ambiente
- Formulazione fornibile con inattivanti dei sanitizzanti e antibiotici
- Certificati di qualità forniti in dotazione
- Coperchio con chiusura "Click & Safe" & Vent Position

RIGEL Life Sciences, forte dell'esperienza maturata durante lo sviluppo dell'impattore microbiologico per impianti di monitoraggio in cleanroom HEBAS, ha inserito nel proprio catalogo una linea di prodotti dedicati al campionamento ambientale dell'aria e delle superfici in cleanroom: le piastre Petri PMM-Dr. Mueller da 90 mm e contact plate con inattivanti, da impiegare nelle attività di controllo della contaminazione delle superfici e dell'aria mediante il metodo ad esposizione o con campionatore attivo.

La formulazione del terreno e i relativi controlli di qualità (sterilità e fertilità) sono eseguiti secondo quanto riportato nelle farmacopee USP ed EP armonizzate.


Le piastre sono fornite con inserto in gel di silice, imballo triplo e gamma irradiato che ne permette l'introduzione nell'area da monitorare scongiurando il rischio di contaminazione ambientale della cleanroom o dell'isolatore.

La elevata qualità del prodotto e il particolare confezionamento, consente di ottenere una lunga shelf life conservando il prodotto a temperatura ambiente.

Le piastre sono fornite complete di certificati di qualità.

Rigel srl offre servizi dedicati alla gestione delle scorte e garantisce stoccaggio e trasporto a temperatura controllata.



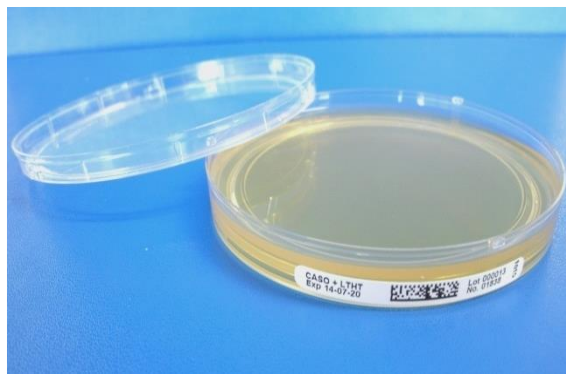

Scheda
tecnica

	CSG – Click & Safe - gamma	CS – Click & Safe
Applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio ambientale in Cleanroom, RABS e isolatori: <p>→Superfici →Operatori →Aria</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio ambientale in Cleanroom ed aree critiche <p>→Superfici →Operatori →Aria →Acqua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terreni selettivi per microrganismi specifici
Prodotto	<ul style="list-style-type: none"> • Settle Plates <ul style="list-style-type: none"> ○ TSA ○ TSA+LTHT ○ TSA+LT+β-LactamasePlus ○ SDA+LTHT • Contact <ul style="list-style-type: none"> ○ TSA+LTHT ○ TSA+LT+β-LactamasePlus ○ SDA+LTHT 	<ul style="list-style-type: none"> • Settle Plates <ul style="list-style-type: none"> ○ TSA ○ TSA+LTHT ○ R2A • Contact <ul style="list-style-type: none"> ○ TSA+LTHT
Confezionamento	Settle plates 90 mm (30 ml Volume terreno) Contact 55 mm (18ml Volume terreno) <ul style="list-style-type: none"> • 10 piastre in Triplo involucro con busta essiccante <ul style="list-style-type: none"> ○ Petri da 90 mm: Confezione da 60 piastre ○ Contact da 55 mm: confezione da 100 piastre 	Settle plates 90 mm (30 ml o 22 ml Volume di terreno) Contact 55 mm (18ml volume di terreno) <ul style="list-style-type: none"> • 10 piastre in singolo involucro con busta essiccante <ul style="list-style-type: none"> ○ Petri da 90 mm: Confezione da 60 piastre ○ Contact da 55 mm: confezione da 100 piastre
Sterilizzazione	Irraggiamento gamma	Nessuna sterilizzazione finale
Conservazione	15-25°C	
Shelf Life	Fino a 9 mesi dalla produzione	
Vantaggi	Facilità di uso e trasporto grazie al meccanismo di blocco del coperchio (Click & Safe). Ridotta formazione di condensa. Ridotta disidratazione e possibilità lunghi tempi di incubazione. Tracciabilità attraverso barcode/datamatrix e etichette. Trasporto facile e sicuro. Trasporto a temperature controllata con imballo termoisolante. Grazie alla lunga shelf-life, riduzione del numero di lotti e quindi di controlli in ingresso.	

Distribuito in esclusiva per l'Italia da:

RIGEL Life Sciences

Ufficio Commerciale e Logistica
 Piazza C.C. Del Maino, 11
 20086 Motta Visconti (MI) – Italy
 Tel. 02-49491501
 Fax 02-49491502
sales@rigel-ls.com